



XERF™

Lift, Tighten & Tone

A Structural Skin Treatment That Fits Your Life

THE NEW
FACE SHAPER

- ยกกระชับ ปรับรูปหน้า
- ลดเลือนริ้วรอย ความหย่อนคล้อย
- ฟื้นฟูโครงสร้างผิวจากภายใน
- รู้สึกสบายตลอดการทำทรีตเมนต์
- ไม่เจ็บ ไม่ต้องพักฟื้น

XERF™

Lift, Tighten & Tone

AT LAST EXPERIENCE

XERF is a monopolar RF treatment that delivers thermal energy deep into the skin.

Tightens Skin Without the Need
for Numbing, Needles, or Downtime.

XERF™

Lift, Tighten & Tone

Meet The World's First Dual-Frequency Monopolar RF Treatment

นวัตกรรมแรกของโลกที่ผสานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) สองความถี่ (6.78 MHz และ 2 MHz) เข้าด้วยกัน เพื่อส่งพลังงานลงสู่ผิวของคุณได้อย่างตรงจุด โดยความถี่สูงจะทำงานในชั้นผิวหนัง เพื่อความเรียบเนียนส่วนความถี่ต่ำ จะลงลึกเพื่อยกกระชับ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เข็ม ไม่ต้องใช้ยาชาไม่ต้องพักฟื้น สัมผัสได้ถึงผิวที่เรียบเนียนและยกกระชับขึ้นอย่างชัดเจน




Innovative dual frequency combination

Reach three skin depth levels
with one device and in one treatment

XERF™
Lift, Tighten & Tone

การควบคุมความลึก 3 ระดับ Shallow Middle Deep

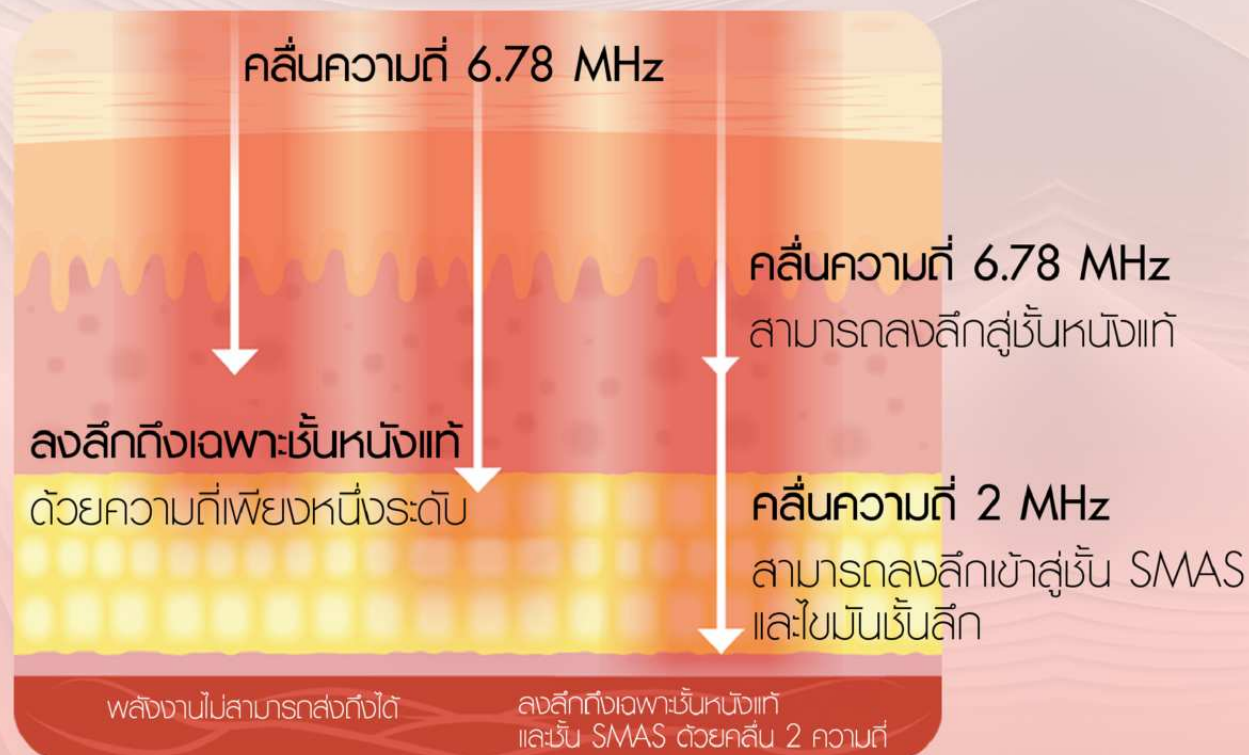

Fit The Depth

A Perfect Fit For Each Area of Face

XERF โดดเด่นด้วยการผสาน 2 ความถี่ของคลื่นวิทยุ Monopolar RF (6.78 MHz & 2 MHz) ซึ่งช่วยให้สามารถส่งพลังงานความร้อนลงสู่ผิวได้ลึกถึง 3 ระดับ



Shallow (ตื้น)

หน้าผาก

Middle (กลาง)

กึ่งกลางใบหน้า
(โหนกแก้ม) ลำคอ

Shallow (ลึก)

ส่วนล่างของโหนกแก้มลง
ไปจนถึงบริเวณใต้คาง


- **Shallow (6.78 MHz):** เหมาะสำหรับการทำบริเวณ หน้าผาก
มุ่งเน้นการลดเลือนปัญหาริ้วรอยเล็ก ๆ ลดปัญหารูขุมขนกว้างและปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน ดูกระชับใสขึ้น
- **Middle (6.78 MHz):** เหมาะสำหรับการทำบริเวณส่วนกลางของใบหน้าและลำคอ
ช่วยลดปัญหาผิวหย่อนคล้อย ปัญหาริ้วรอยและร่องแก้ม และปรับโครงสร้างผิวให้แข็งแรงขึ้นจากภายใน
- **Deep (6.78 MHz+2 MHz):** เหมาะสำหรับการทำบริเวณรอบหน้า
ช่วยสร้างกรอบหน้าให้คมชัดขึ้นทำให้ใบหน้าดูยกกระชับ และลดปัญหาไขมันสะสมหรือความหย่อนคล้อยบริเวณใต้คาง
- ทุกโหมดความลึกสามารถปรับระดับพลังงานได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10

Fit By Heat

Intelligent Cooling Device™


Wave Fit Pulse ปรับพลังงาน RF โดยอัตโนมัติ ด้วยระบบ AI ที่ปรับพลังงานตามสภาพผิวของแต่ละบุคคลที่ให้การรักษาเป็นไปด้วยความแม่นยำและสร้างสมดุลที่พอดีระหว่างปล่อยพลังงานความร้อนและ ICD Cooling

Fixed Pulse

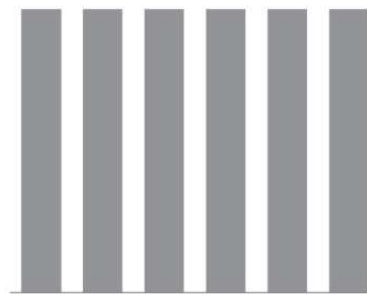

เครื่องรุ่นดั้งเดิมจะมีการปล่อยพลังงานที่เข้มข้นออกมา 5-6 Pulses ส่งผลให้อุณหภูมิผิวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างความรู้สึกที่เจ็บมากเกินไปได้

XERF: Wave Fit™ Pulse

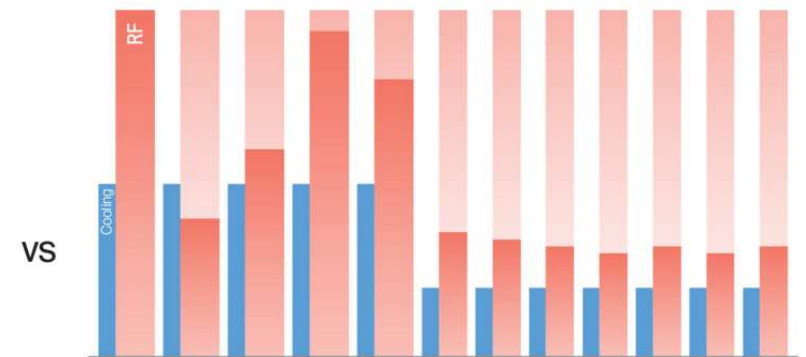

เทคโนโลยีของ XERF จะแบ่งการปล่อยพลังงานออกเป็น Pulse ย่อยได้สูงสุดถึง 12 Pulses โดยจะมีการปล่อย Cooling ออกมาก่อนการปล่อย RF ในทุก ๆ ครั้ง เพื่อป้องกันอุณหภูมิผิวที่สูงมากเกินไป ทำให้คนไข้รู้สึกสบายขณะทำการรักษา

Fit For Skin

Real-Time Temperature Sensing

- มีการตรวจจับอุณหภูมิผิวหนังในขณะที่ทำการรักษาในทุก ๆ เชื้อต่ออย่างแม่นยำ
- หยุดการทำงานโดยอัตโนมัติที่อุณหภูมิ 43°C เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนไข้

Advanced ICD Cooling

- ระบบปรับความเย็นอัจฉริยะจะช่วยปกป้องผิวหนังชั้นบน
- รักษาความสมดุลระหว่างการส่งพลังงานความร้อนและอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
- ทำให้รู้สึกสบายและปลอดภัยตลอดการทำกริตาเมนต์



Enhanced Safety with the Proprietary Spider Pattern EFFECTOR


Proprietary Spider Pattern EFFECTOR

ด้วยเทคโนโลยี Spider Pattern ที่ได้รับสิทธิบัตรเฉพาะของ XERF ทำให้พลังงานความร้อนกระจายตัว อย่างสม่ำเสมอทั่วหัวทิว พร้อมลดความร้อนสะสมที่ขอบหัวทิว เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด ความเสี่ยงของฟิวไหม้จากความร้อนจึงทำให้คนไข้รู้สึกสบาย ตลอดการทำการรักษา

1st Generation RF TIP



XERF


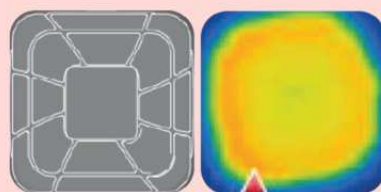


EFFECTOR 60

20 x 30 mm
Shots 600



The Bigger & Better EFFECTOR

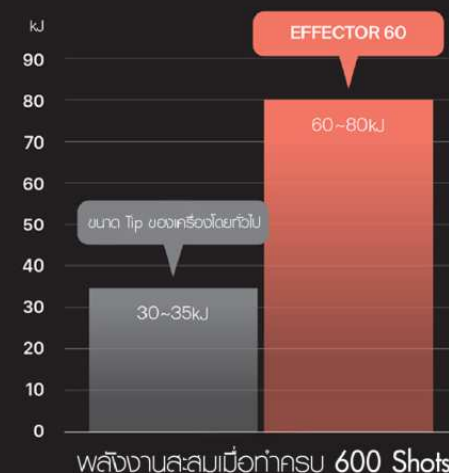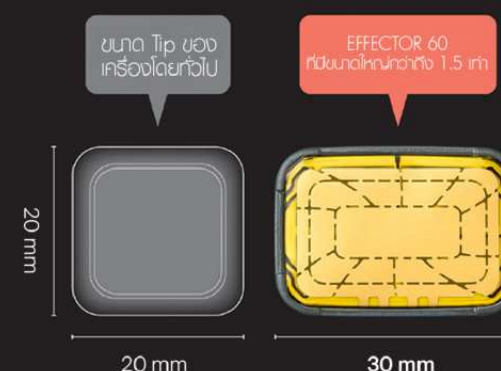

หัว EFFECTOR 60 ของนวัตกรรม XERF มีขนาดใหญ่ 20x30 mm ช่วยให้การทำการรักษาเร็วขึ้น

FAQ คำถามที่พบบ่อย

การทำ XERF แต่ละครั้งใช้เวลานานแค่ไหน?

การทำคริสตัลแมนต้าใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที และจำนวนการทำคริสตัลแมนต้าขึ้นอยู่กับพิจารณาของแพทย์

สามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ทันทีหลังทำหรือไม่?

XERF เป็นการทำคริสตัลแมนต้าที่ไม่ต้องพักฟื้น (No Downtime) จึงสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติและยังสามารถแต่งหน้าได้ตามปกติ
แนะนำให้หลีกเลี่ยงการออกแดดและควรทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอ

XERF จำเป็นต้องใช้ยาชาหรือไม่?

XERF ไม่จำเป็นต้องใช้ยาชา เนื่องจากระบบ Wave Fit Pulse ที่ทำหน้าที่ควบคุมการปล่อยพลังงานความร้อนอัตโนมัติ ควบคู่กับระบบทำความเย็น ICD Cooling จะช่วยลดอุณหภูมิของผิวหนังชั้นบน ทั้งสองส่วนนี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพลังงานความร้อนและความเย็น ทำให้
คุณได้รับประสบการณ์การทำคริสตัลแมนต้าที่สบายและมีประสิทธิภาพ

การทำ XERF แต่ละครั้งใช้จำนวนที่เชิ้อ?

จำนวนเชิ้อจะแตกต่างกันไปตามสภาพผิวและบริเวณที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ทั้งนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินและให้คำแนะนำเพื่อการทำ
คริสตัลแมนต้าอย่างเหมาะสม


ระหว่างขั้นตอนการทำ XERF จะรู้สึกอย่างไร?

ระหว่างการทำคริสตัลแมนต้าคุณจะไม่รู้สึกอุ่น ๆ บริเวณใบหน้าและด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของผิวได้อย่างต่อเนื่อง

XERF Treatment Results

Gender	Female
Age group	50's
Trouble Points	Improvement in Double Chin / Nasolabial Fold / and Under-Eye Sagging

BEFORE

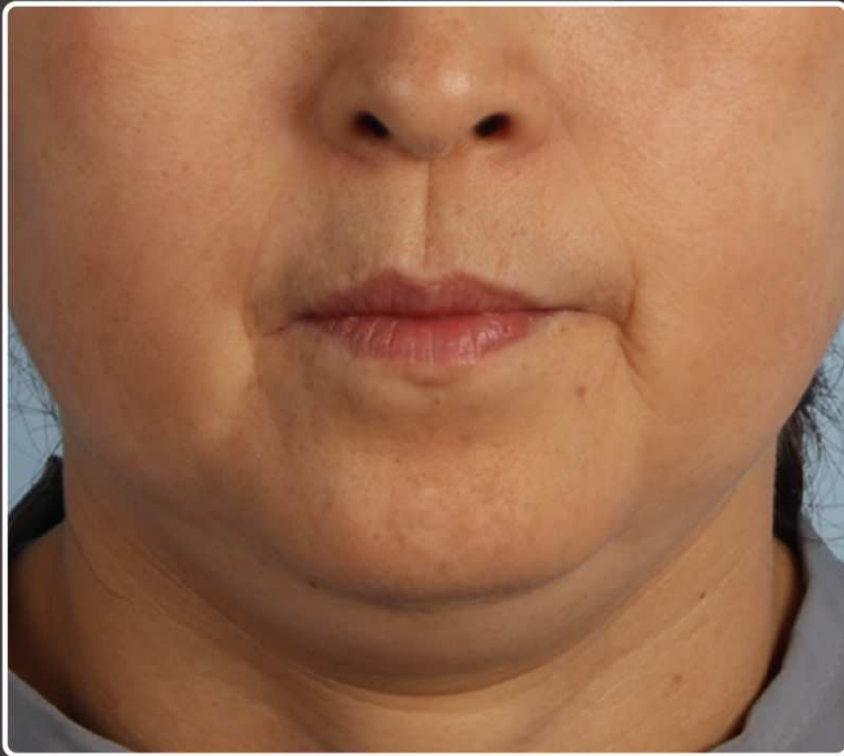

Results may vary from person to person

4 WEEKS AFTER
1 TREATMENT



XERF Treatment Results


Conventional single
monopolar RF

6.78 MHz + 2 MHz
3 months after



XERF™

6.78 MHz + 2 MHz
3 months after

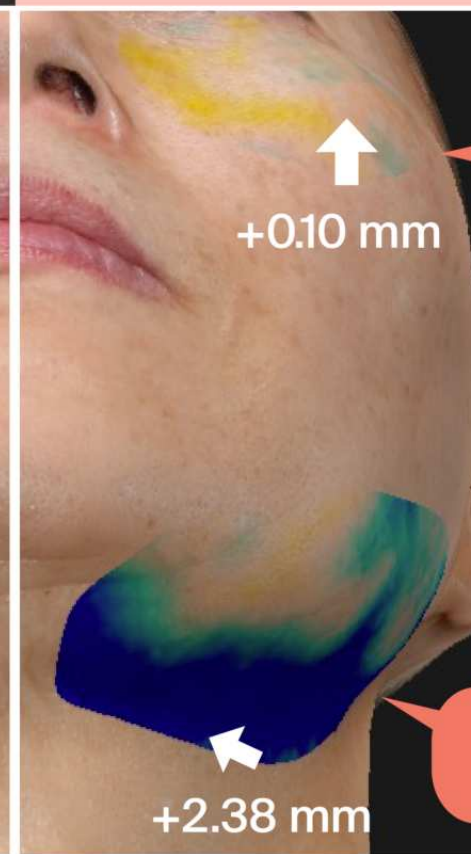


Increase
cheekbone volume

Reduce
under-chin fat

XERF Treatment Results


Gender	Male
Age group	60's
Trouble Points	Marionette lines / Lack of skin elasticity

BEFORE

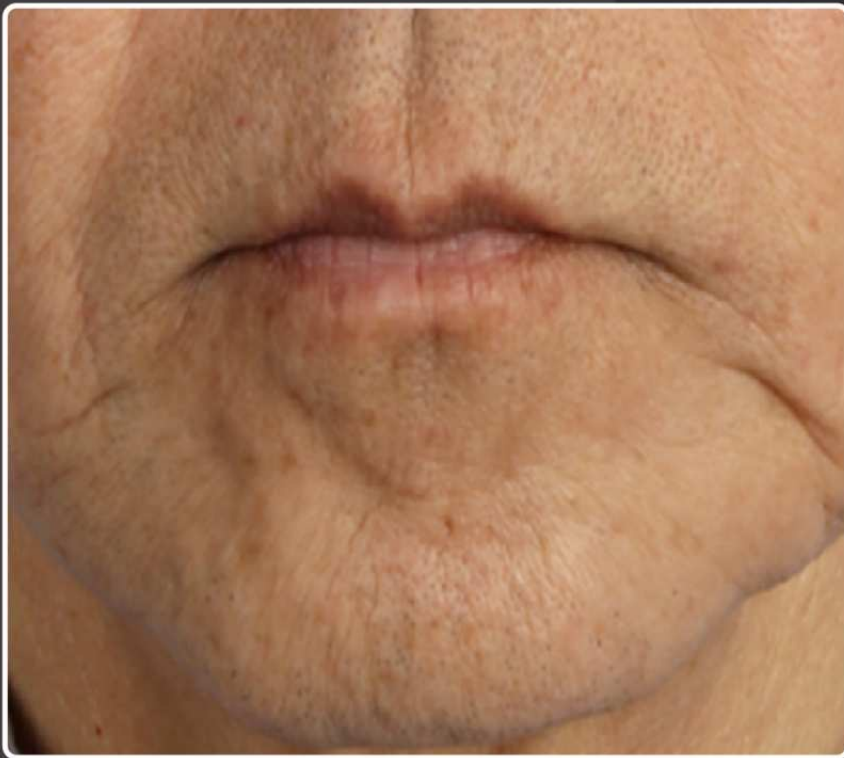

Results may vary from person to person

3 MONTH AFTER
1 TREATMENT

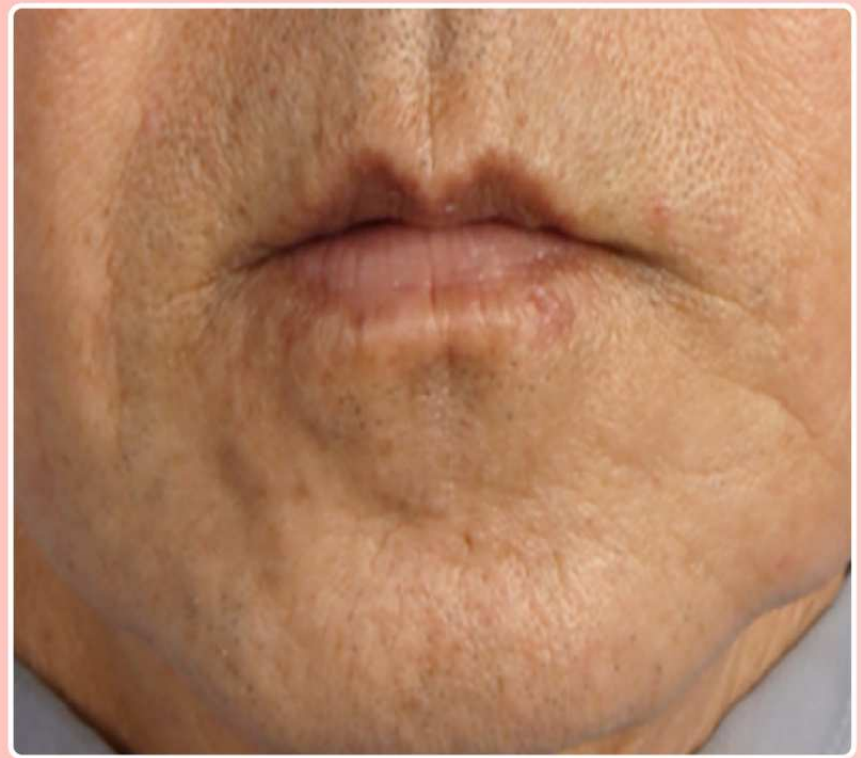

XERF Treatment Results


Gender	Male
Age group	60's
Trouble Points	Marionette lines / Lack of skin elasticity

BEFORE



Results may vary from person to person


3 MONTH AFTER
1 TREATMENT

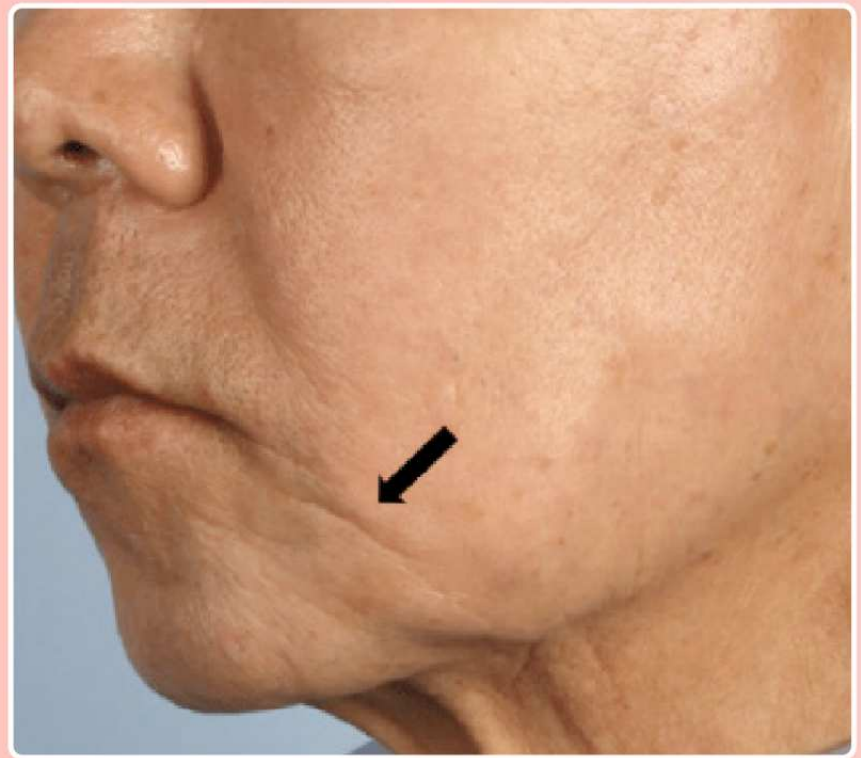

XERF Treatment Results

Gender	Male
Age group	30's
Trouble Points	V-Line / Double chin

BEFORE

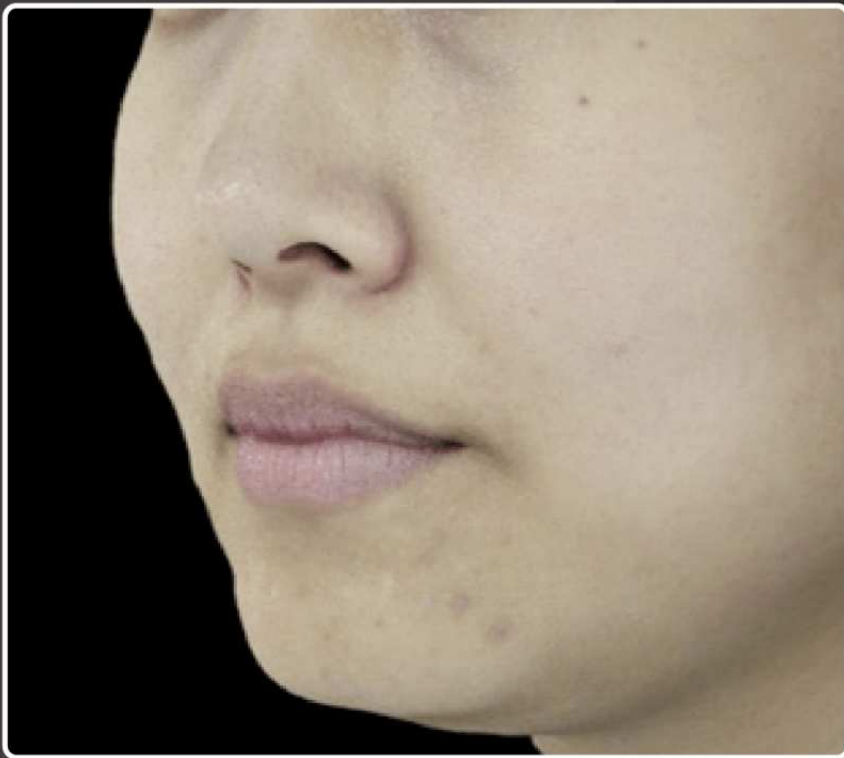

Results may vary from person to person

3 MONTH AFTER
1 TREATMENT



XERF Treatment Results

Gender	Female
Age group	50's
Trouble Points	Marionette lines / Under chin drooping / Loss of elasticity

BEFORE



Results may vary from person to person

3 MONTH AFTER
1 TREATMENT



XERF Treatment Results


Gender	Female
Age group	30's
Trouble Points	V-Line / Cheek volume / Loss of elasticity

BEFORE



Results may vary from person to person


4 WEEKS AFTER
1 TREATMENT

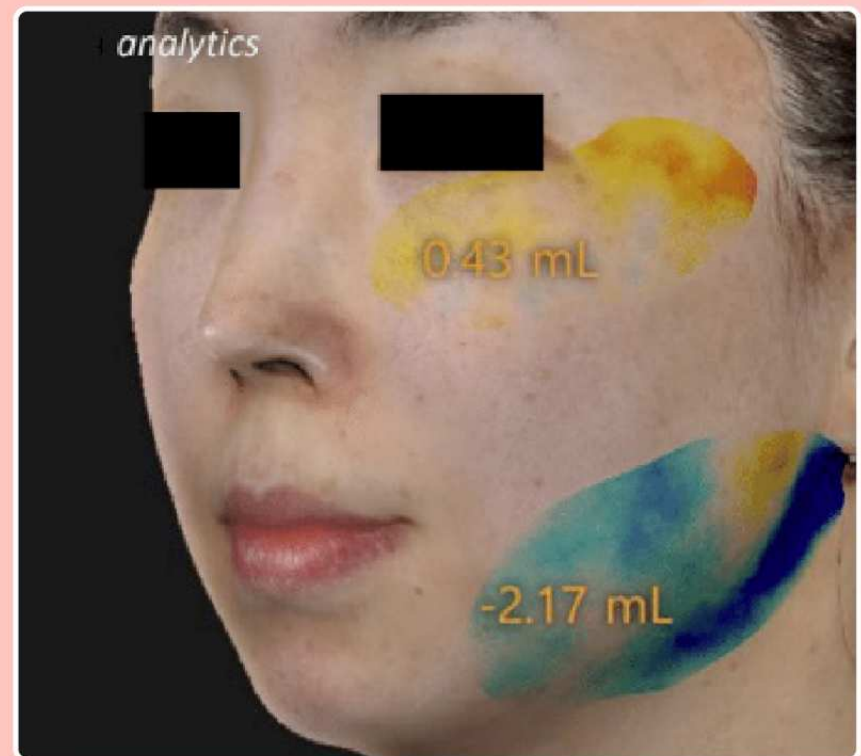

XERF Treatment Results


Gender	Female
Age group	30's
Trouble Points	V-Line / Cheek volume / Loss of elasticity

BEFORE

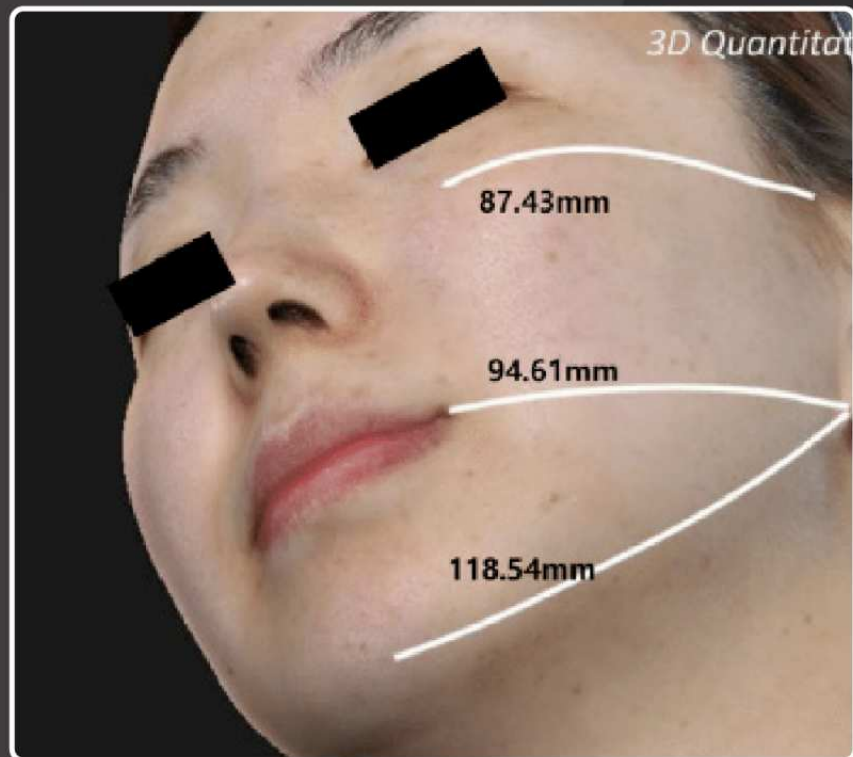

Results may vary from person to person

4 WEEKS AFTER 1 TREATMENT

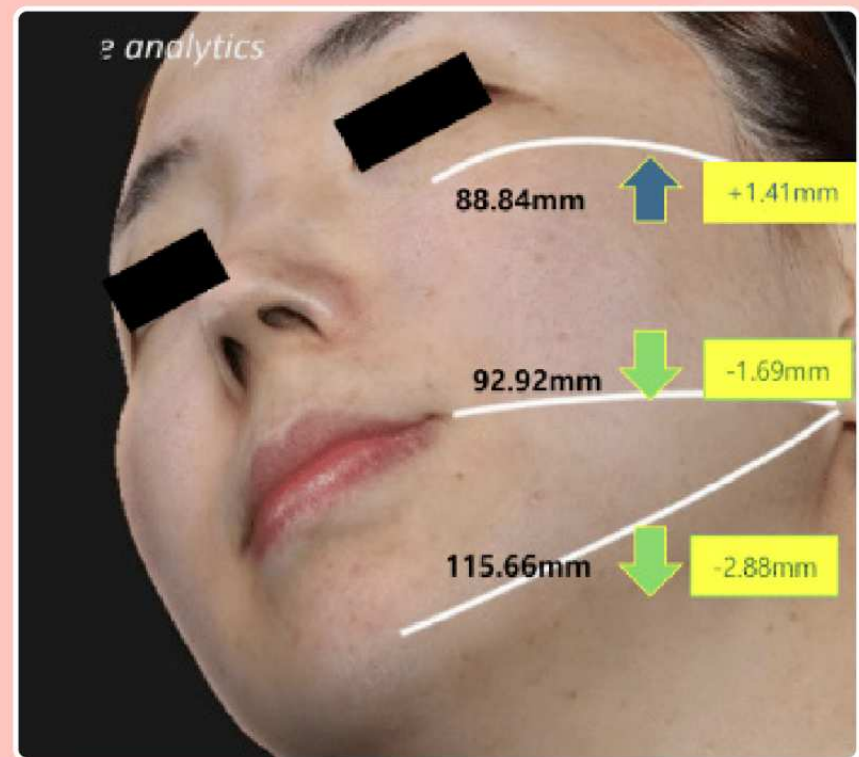

XERF Treatment Results


Gender	Female
Age group	40's
Trouble Points	V-Line / Fine Wrinkles and loss of Elasticity

BEFORE



Results may vary from person to person


4 WEEKS AFTER
1 TREATMENT

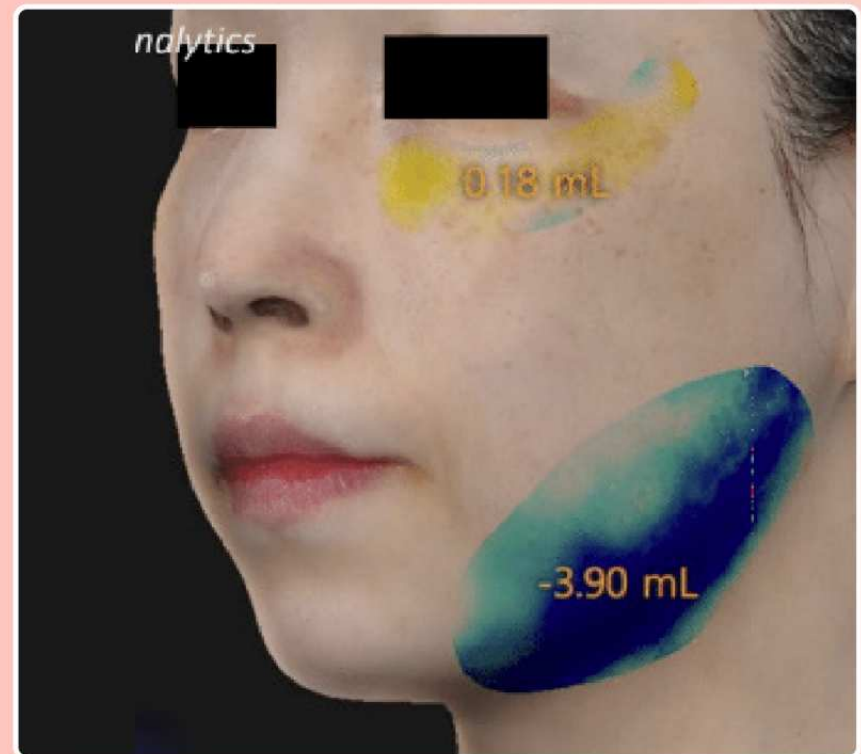

XERF Treatment Results


Gender	Female
Age group	40's
Trouble Points	V-Line / Fine Wrinkles and loss of Elasticity

BEFORE

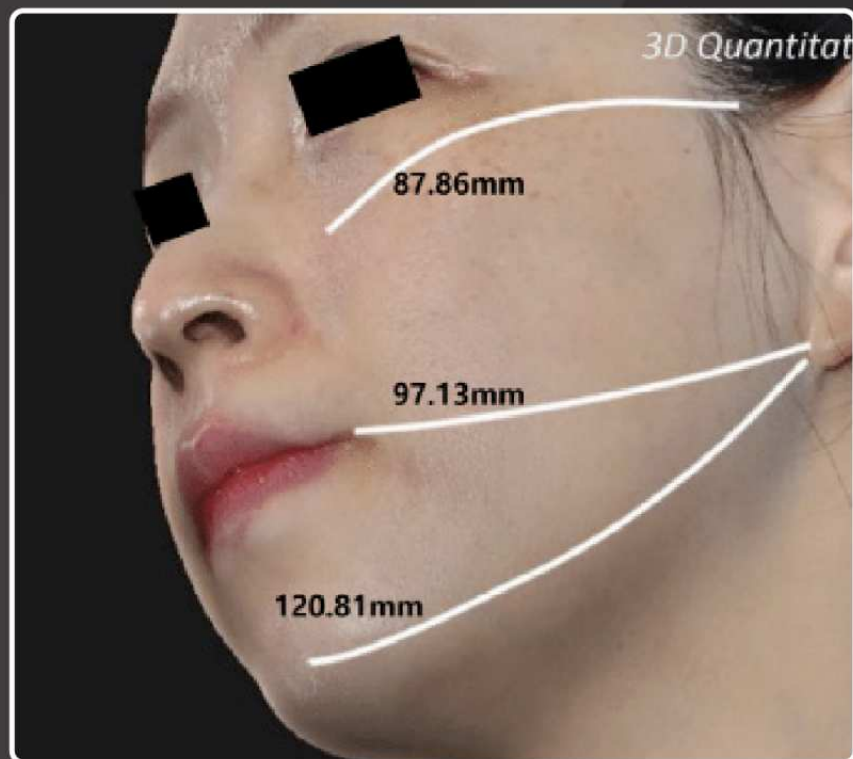

Results may vary from person to person

4 WEEKS AFTER 1 TREATMENT

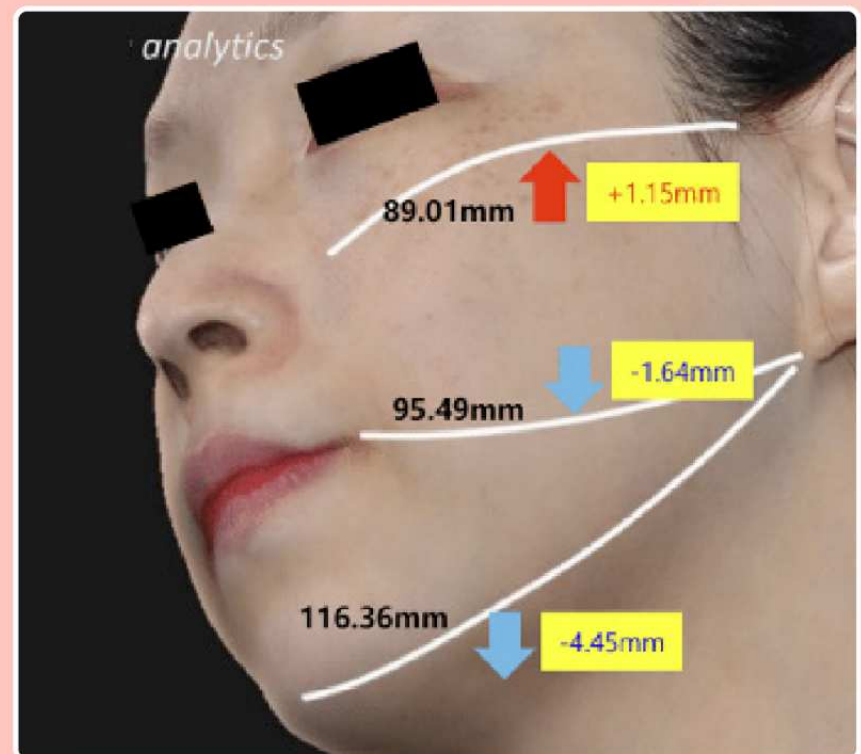

XERF Treatment Results

Gender	Female
Age group	20's
Trouble Points	Pores / Redness and breakouts from sunbuns

BEFORE



Results may vary from person to person

3 MONTH AFTER
1 TREATMENT



THE NEW

XERF™
Lift, Tighten & Tone

TIGHTENS SKIN WITHOUT THE NEED
FOR NUMBING NEEDLES OR DOWNTIME.

XERF™

Lift, Tighten & Tone



For more information

 @AESTELLAR



AESTELLAR

AESTELLAR
— AESTHETICS —

No.168/67 Nakniwat Road, Ladphrao Subdistrict, Ladphrao District,
Bangkok, 10230 Tel: (+66)63-669-9699 Email: contact@aestellar.com

www.aestellar.com

*For educational purposes and internal use only. Not to be shared publicly.